

Korrektter Aufbau des Ein-Schlauch-Systems:




Schlauchwechsel und Test (Achtung: möglichst zügig durchführen- wenn man zu langsam ist, bricht der Schlauchtest ab und man muss von vorne beginnen...)



1) wenn das Gerät an, aber nicht im Betrieb ist, auf den An/Aus Knopf drücken



2) es erscheint dieses Menü, hier lange und kräftig auf das obere Feld drücken

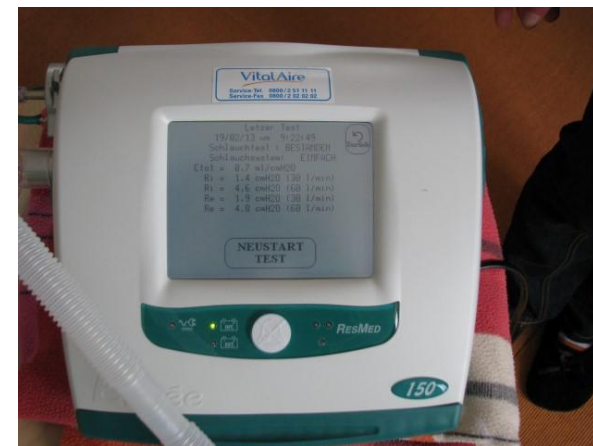

3) es kommt dieses Untermenü- auf „Neustart Test“ drücken



4) Anweisung befolgen: alle Schläuche abziehen, Sauerstoffzufuhr hinten entfernen




5) dann auf „weiter“ drücken, Gerät arbeitet, kurz warten



6) Inspiration mit flacher Hand verschliessen, mit der anderen auf „weiter“ drücken



7) Schläuche (ohne Gänsegurgel, ohne Bakterienfilter!) anstecken, „weiter“ drücken, abwarten

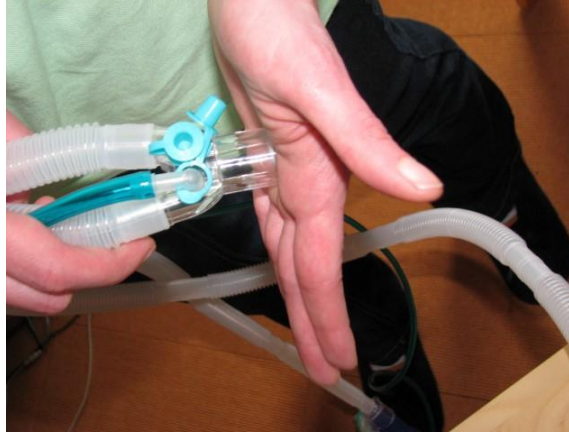

8) Offenes Ende mit flacher Hand dicht verschliessen, auf „weiter“ drücken, abwarten, FERTIG! Abwarten... jetzt springt das cpap-Gerät automatisch wieder zurück in den normalen Startbildschirm

Inhalieren:



Diese Teile werden benötigt;
Nach dem Inhalieren bitte wieder so
auseinanderlegen und gut auswaschen und mit
trockenem Tuch auswischen



So sieht der Inhalieraufsatz
zusammgebaut aus, die Inhalierlösung
wird mit Spritze in die obere
Kammer gefüllt



Der Aufsatz wird zwischen Schlauch und
Gänsegurgel gesteckt

Inhalation starten in dem auf den blauen Knopf gedrückt wird.

Die Kammer muss waagrecht liegen, damit die Lösung vernebelt werden kann. Wenn kein Nebel mehr kommt, Inhaliergerät ausschalten und T-Stück mit dem Aufsatz entfernen. Den Inhalieraufsatz inkl. T-Stück bitte sofort auseinander bauen und gründlich unter fließendem Wasser auswaschen. Alles mit trockenem Tuch abwischen und zum endgültigen Trocknen auf ein Tuch legen

Montage des Sauerstoffanschlusses:

ACHTUNG: Die Sauerstoffzufuhr IMMER abziehen, bevor der Betrieb gestoppt wird!

Stöpsel mit etwas Druck einstecken. Zum Abziehen seitlichen Metallbügel drücken, Sauerstoffanschluss kommt rausgesprungen

